




Lahve na rozpouštědla s bezpečnostními uzávěry

Chtěli byste mít bezpečné pracovní prostředí ve Vaší laboratoři? Nemáte obavy z výparů rozpouštědel, která stojí na Vašem HPLC systému? Jednoduché řešení každodenního problému nabízí lahev **InfinityLab Stay Safe**. Tato lahev je určena k tomu, abyste do ní mohli umístit nepoužívané hadičky pro přívod mobilní fáze díky bezpečnostním víčkům se rozpouštědla nemohla odpařovat. Víčka zároveň minimalizují kontaminaci ultračistých HPLC a LCMS rozpouštědel ze vzduchu v laboratoři.

	Promytí HPLC s běžnou lahví →	Promytí HPLC s lahví InfinityLab Stay Safe
 Vyhněte se škodlivým výparům	Několik hadiček a víček v jedné lahvi znamená nekontrolovatelné odpařování rozpouštědel do ovzduší v laboratoři.	Bezpečnostní víčka pevně zašroubovaná do každého hrdla promývací láhve spolehlivě brání samovolnému úniku par rozpouštědla do ovzduší laboratoře.
 Snadná manipulace	Jednotlivé promývací hadičky mohou snadno vypadnout z nedokonale utěsněné nebo otevřené lahve.	Snadná manipulace s jednotlivými hadičkami bez rizika samovolného překroucení nebo vyklouznutí.
 Zabraňte nechtěnému nasávání vzduchu	Víčka i samotné hadičky jen volně visí a při náhodném vyklouznutí může dojít k nechtěnému nasávání vzduchu do HPLC.	Všechny hadičky jsou pevně přichyceny k bezpečnostním víčkům, což brání nežádoucímu nasávání vzduchu do HPLC.




Startovací balíček obsahující promývací lahev s více hrdly (PN 5043-1339), včetně setu bezpečnostních ventilů (PN 5043-1222) - 4 bezpečnostní uzávěry s filtry a ventily



kat.č. 5043-1340

Zhlédněte, jak se snadno se speciální zásobní lahví na rozpouštědla pracuje.

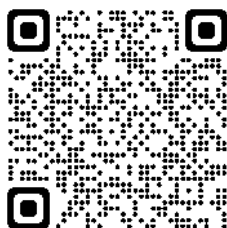

Samostatná promývací lahev s více hrdly

kat.č. 5043-1339

Set 4 bezpečnostních uzávěrů s filtry a ventily



kat.č. 5043-1222

Objednejte si od nás i další produkty z řady InfinityLab Stay Safe pro bezpečné prostředí ve Vaší laboratoři.



kat.č. **9301-6528**
InfinityLab solvent bottle, clear, 1 L
kat.č. **9301-6528**
InfinityLab solvent bottle, amber, 1 L
kat.č. **9301-6529**
InfinityLab identification silicone rings, 8/pk



kat.č. **5065-4421**
Solvent bottle (GL45) clear, 2 L,
2 inlets, with cap

kat.č. **5043-1339**
InfinityLab Stay Safe
purging bottle, 1L



kat.č. **5043-1337**
Waste can, 10 L, with S60
thread. Recommend for use
with InfinityLab Stay Safe cap
(kat.č. **5043-1336**)



kat.č. **5043-1196**
6 L waste can GL45



kat.č. **5043-1217**
InfinityLab stay safe
cap, GL45, 1 port.
Includes 1 fitting
(3.2 mm) and 1
venting valve



kat.č. **5043-1218**
InfinityLab stay safe cap,
GL45, 2 ports. Includes
2 fittings (3.2 mm)
and 1 venting valve



kat.č. **5043-1192**
InfinityLab thread
adapter, GL45(M)
to GPI 38(F), PTFE.
For InfinityLab Stay
Safe cap



kat.č. **5043-1220**
InfinityLab stay safe
cap, GL45, 4 ports
for waste. Includes
4 fittings (2 x 3.2 mm,
1 x 2.3 mm, 1 x 1.6 mm)
and 1 leak hose



kat.č. **5043-1190**
InfinityLab venting valve
with time strip. For use with
InfinityLab Stay Safe Caps



kat.č. **5043-1193**
InfinityLab charcoal filter
with time strip, 58 g. For
use with InfinityLab Stay
Safe Waste Caps



Fittings

kat.č. **5043-1214** green, 1.6 mm tubing
kat.č. **5043-1215** purple, 2.3 mm tubing
kat.č. **5043-1216** red, 3.2 mm tubing
kat.č. **5043-1198** white, screw plug,
1/8 inch, PTFE, 2/pk




kat.č. **5043-1207**
2-port waste collector

Inline filtry Agilent

Chraňte svoji kolonu před nežádoucími nečistotami pocházejícími z různých částí systému (vzorky, opotřebované části systému, znečištěné mobilní fáze) a používejte **Agilent InfinityLab Quick Change inline filtr**, který vychytává drobné nečistoty před vstupem do kolony.

Co můžete získat používáním Agilent InfinityLab Quick Change inline filtru:

- Významné prodloužení životnosti kolony nebo předkolonek
- Snížení provozních nákladů na analýzu vzorku
- Oproti běžným filtrům můžete provést až 100 výměn filtru bez netěsností
- Tlaková odolnost 1300 bar

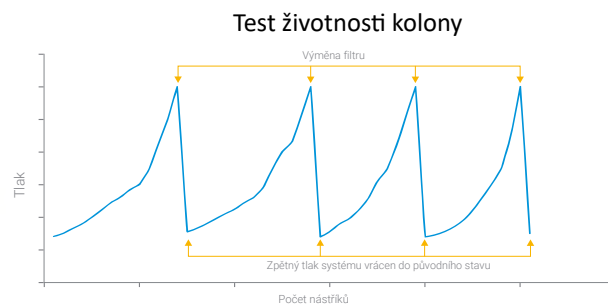

Agilent InfinityLab Quick Change inline filtry

(zleva: flexibilní varianta filtru s kapilárou, zprava: fixní zapojení do kolony)

Výhody použití Agilent InfinityLab Quick Change inline filtru:

- Snadné manuální dotažení při výměně filtračního disku (bez rizika podtěkání z nedostatečného utážení)
- Bezdotyková výměna filtračních disků pro minimalizaci kontaminace
- Široký výběr rozměrů a velikosti porozity filtračních disků pro každý HPLC systém





2,1 mm
0,2 μm

2,1 mm
0,5 μm


4,6 mm
0,2 μm

4,6 mm
0,5 μm

4,6 mm
2,0 μm

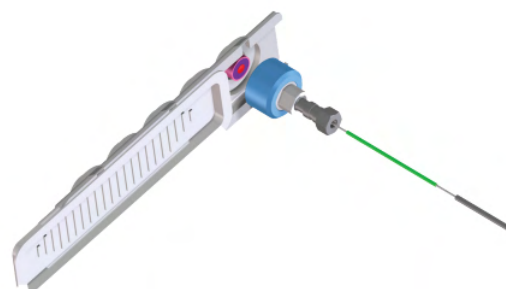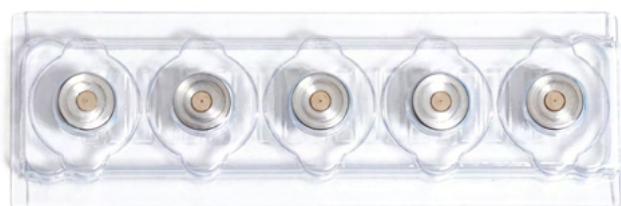

Inline filtry Agilent

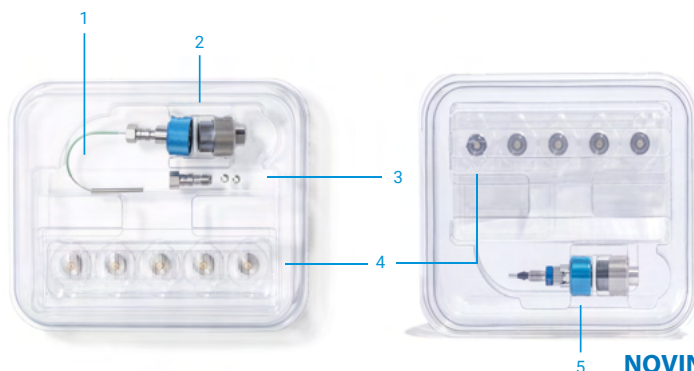

InfinityLab Quick Change inline filter

1. Kapilára, SST, délka: 90 mm
2. Pouzdro filtru (dvě části)
3. Fitingy pro uchycení kapiláry
4. Filtrační disky, 5 ks v balení
5. Tělo filtru včetně Quick Turn fittingu

NOVINKA!

Nová verze inline filtru včetně fittingu pro umístění před kolonu.

Sady inline filtrů

kat.č. **5067-1603**

InfinityLab Quick Change inline filter assembly for UHPLC (incl. 5 filter discs 2.1 mm id, 0.2 μ m porosity), with 90 mm flexible capillary

kat.č. **5067-1602**

InfinityLab Quick Change inline filter assembly for HPLC (incl. 5 filter discs 4.6 mm id, 0.5 μ m porosity), with 90 mm flexible capillary

kat.č. **5067-1606 NOVINKA!**

InfinityLab Quick Change inline filter assembly with rigid capillary for HPLC (incl. 5 filter discs 4.6 mm id, 0.5 μ m porosity)

kat.č. **5067-1607 NOVINKA!**

InfinityLab Quick Change inline filter assembly with rigid capillary for UHPLC (incl. 5 filter discs 2.1 mm id, 0.2 μ m porosity)

NOVINKA!

kat.č. **5067-5966** - Quick Turn Fitting

kat.č. **5043-0924** - Ferrule for Quick Turn Fitting

Filtrační disky

kat.č. **5067-1610**

Filter discs, 2.1 mm id, 0.2 μ m porosity, 5/pk

kat.č. **5067-1611**

Filter discs, 2.1 mm id, 0.5 μ m porosity, 5/pk

kat.č. **5067-1612**

Filter discs, 4.6 mm id, 0.2 μ m porosity, 5/pk

kat.č. **5067-1613**

Filter discs, 4.6 mm id, 0.5 μ m porosity, 5/pk

kat.č. **5067-1614**

Filter discs, 4.6 mm id, 2.0 μ m porosity, 5/pk

Náhradní kapiláry

kat.č. **5023-3344**

Capillary, stainless steel, 0.12 mm id, 90 mm length, 2x extra-long fittings, pre-swaged on one end, non-swaged on the other end, for inline filter for UHPLC

kat.č. **5023-3343**

Capillary, stainless steel, 0.17 mm id, 90 mm length, 2x extra-long fittings, pre-swaged on one end, non-swaged on the other end, for inline filter for HPLC



Zde se můžete podívat
jak vyměnit in-line filtr



Aktualizace: 19. 2. 2024